

Neuroform Atlas Stent System

カタログ番号	品名	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	推奨血管径
EZAS3015*	Neuroform Atlas 3.0x15	3.0	15	≥2.0mm and <3.0mm
EZAS3021	Neuroform Atlas 3.0x21	3.0	21	≥2.0mm and <3.0mm
EZAS4021	Neuroform Atlas 4.0x21	4.0	21	≥3.0mm and <4.0mm
EZAS4521	Neuroform Atlas 4.5x21	4.5	21	≥4.0mm and ≤4.5mm
EZAS4530	Neuroform Atlas 4.5x30	4.5	30	≥4.0mm and ≤4.5mm

適合マイクロカテーテル内径:0.0165/0.017 inches

※特定出荷製品

Microcatheters

カタログ番号	品名	先端部外径／内径 (F/inches)	手元部外径 (F/inches)	全長 (cm)	先端柔軟長 (mm)
C1775ST	Excelsior XT-17 Microcatheter スタンダードストレート 2マーカ―	1.7/0.017	2.4/0.031	150	7.5
168189	Excelsior SL-10 Microcatheter ストレート 2マーカ―	1.7/0.0165	2.4/0.031	150	6

販売名：ニューロフォーム アトラス
医療機器承認番号：22900BZX00027000

販売名：トラッカー エクセル インフュージョン カテーテル
医療機器承認番号：21000BZY00720000


この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベルをご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: 1912/81480/3m
KM/CO 3m 12/19

Printed in Japan

製造販売元
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
tel:03-6894-0000
www.stryker.com/jp

Copyright © 2019 Stryker
NV00014553.AC

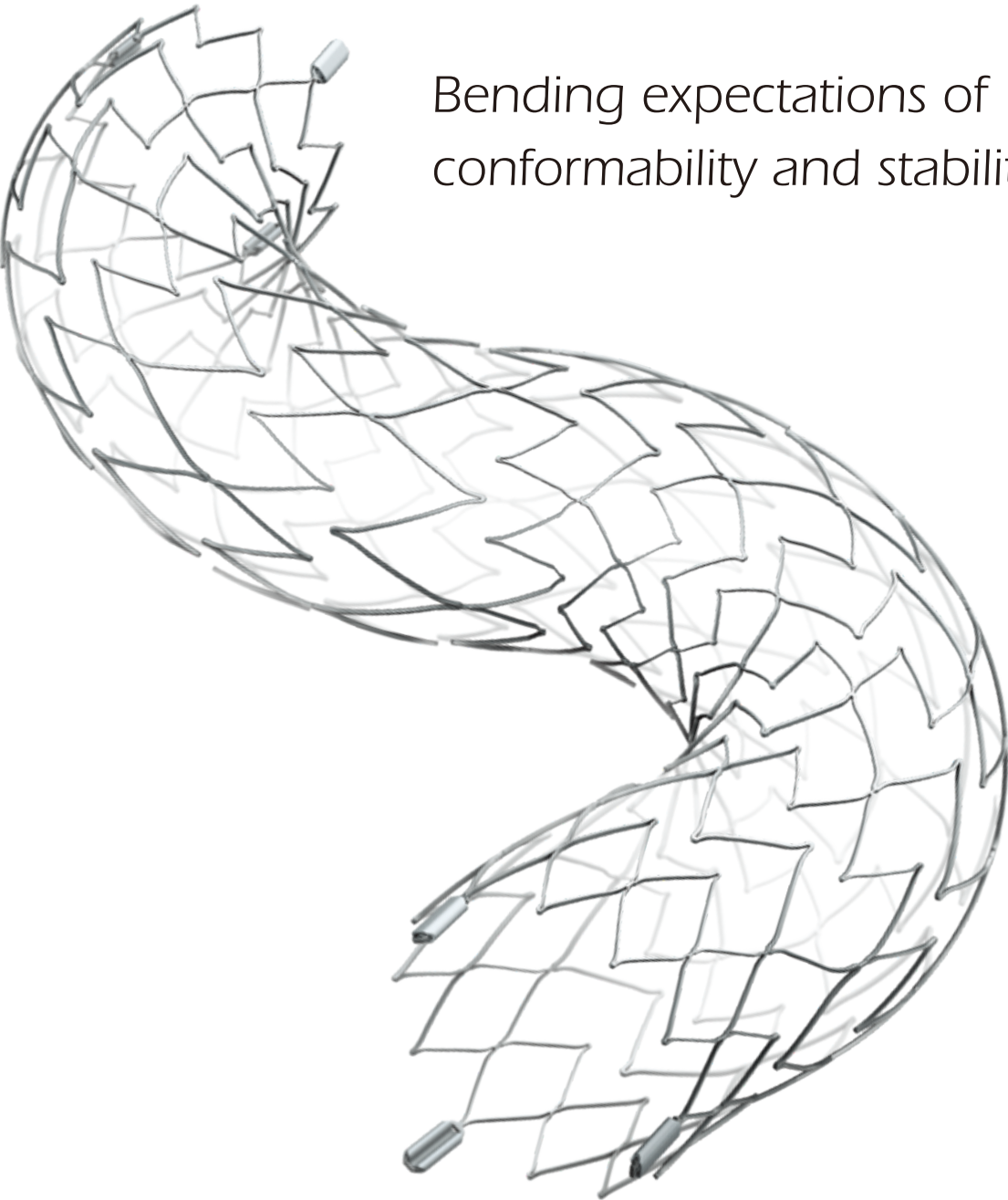

Bending expectations of
conformability and stability.


Neuroform Atlas[®]
STENT SYSTEM

Neuroform Atlas[®]

STENT SYSTEM

ConformabilityとStability、Easyへの果てなき探究

ニューロフォーム アトラスは、更なるコンフォーマビリティとスタビリティ、簡便な操作性のための要素を一から設計に落とし込みデザインしました。ユニークな 12 クラウン、8 クラウンのアダプティブデザインは安全な手技と効果的なステント支援下塞栓術のために、高いコイル塊のサポートと優れた血管へのアポジションを実現させました。

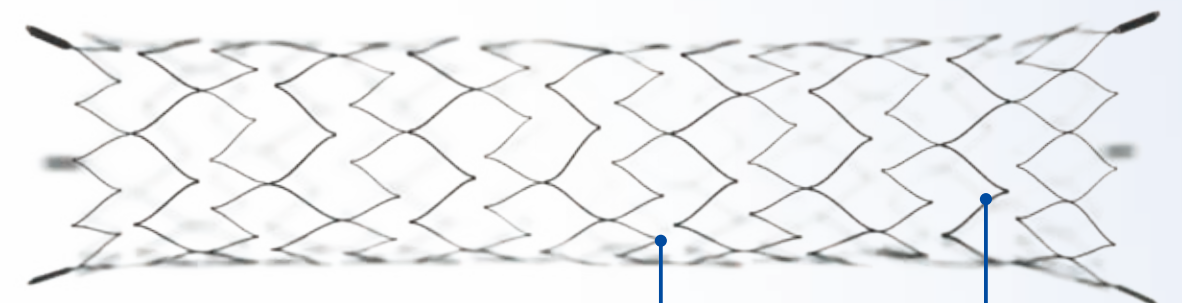

12クラウン

高い
柔軟性と
スキャフォールド性

8クラウン

高い
サポート性と
アンカリング性


CONFORMABILITY

■ 血管壁に密着

アダプティブデザインにより、コンフォーマビリティとスタビリティを両立。高度屈曲血管でもしっかりと血管壁に密着

■ フィッシュスケールの低減

アダプティブデザインとコネクタを増やすことでフィッシュスケールを大幅に低減

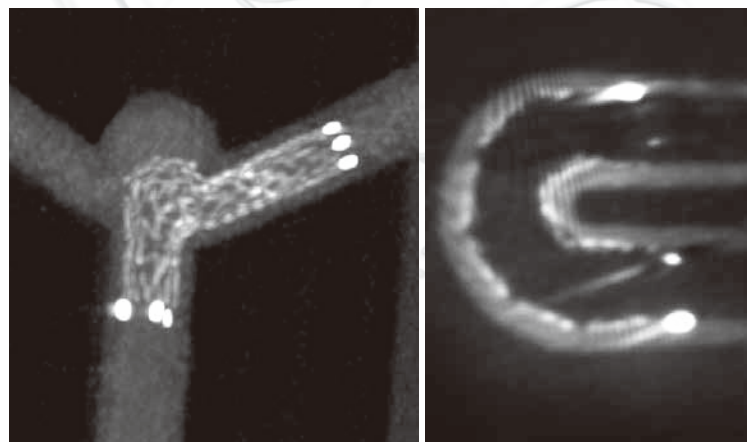


■ 幅広いステージで使用可能

Neuroform Atlasの適応は対象動脈瘤の最大径が5mm以上のため、さまざまな症例に対応

■ ネックカバレッジとリクロス性能を両立したデザイン

アダプティブデザインにより適切なネックカバレッジとトランスセルしやすいセルサイズを両立

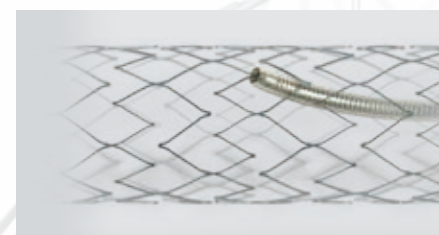

■ アダプティブデザイン (12・8 クラウン)

12 クラウンと 8 クラウンのそれぞれに異なる特性を持たせることで、コンフォーマビリティと適切なラディアルフォースを両立。高度屈曲血管においてもスキャフォールド性を維持しつつ血管壁に密着

■ フレア構造

ステント端が血管の屈曲部に留置されても、血管に密着。クローズドセルの近位端と相まってステント内腔にデバイスをスムーズに通過可能




STABILITY

■ Segmental™ 拡張

セグメントが拡張する毎に血管壁に密着し、アンカリング効果を得ることで、安定したステント留置が可能

■ クローズドセルの近位端

フレア構造と相まって、ステント内腔へのスムーズなデバイスの通過が可能

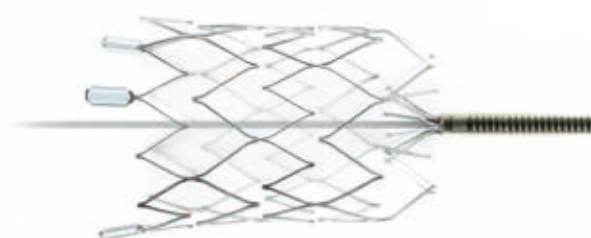

EASY

■ デリバリー用マイクロカテーテル

全てのステントサイズにおいて、Excelsior[®] XT-17[™] Microcatheter、もしくはExcelsior SL-10[®] Microcatheterでデリバリー可能なプロファイル

